

Cytologie par aspiration à l'aiguille fine (AAF) d>IDEXX inVue Dx

Guide de référence rapide



Analyse des échantillons par AAF

IMPORTANT : Une évaluation pathologique ne peut pas être commandée tant que l'analyse initiale de cytologie par AAF d>IDEXX inVue Dx™ n'est pas terminée et que le résultat n'est pas confirmé comme étant diagnostiquement valable. Pour plus d'information, voir la page suivante.

1. Lancez l'analyse de l'échantillon sur la station IDEXX VetLab™.
2. Sur l'écran Sélection des instruments, appuyez sur **IDEXX inVue Dx**, sélectionnez **AAF (Cytologie par aspiration à l'aiguille fine)** comme type d'échantillon, sélectionnez et enregistrez les détails de l'échantillon/de la lésion lorsque vous y êtes invité(e), puis appuyez sur **Exécuter (Run)**.

Remarque : Les détails de l'échantillon/de la lésion sont enregistrés dans le dossier du patient et peuvent servir de fondement aux considérations diagnostiques fournies avec vos résultats. Les détails de l'apparence de la lésion sont requis; les détails des antécédents cliniques sont facultatifs.

3. Préparation de l'échantillon à l'aide d'une trousse IDEXX inVue Dx™ de préparation rapide pour AAF :



- a. Veillez à ce que le diluant soit déposé au fond du tube d'échantillonnage, puis retirez l'emballage en aluminium du tube.



- b. Si l'échantillon a été prélevé en utilisant une technique **sans aspiration**, retirez l'aiguille, aspirez de l'air dans la seringue, puis remettez l'aiguille.

Pour toutes les méthodes de collection : Immédiatement après la collecte, expulsez l'échantillon juste au-dessus du diluant dans le tube à échantillons puis prélevez une petite quantité de dilution dans l'aiguille (pas dans le cylindre de la seringue) et expulsez-la vers le fond du tube 2 ou 3 fois pour rincer la seringue. Ensuite, retirez l'aiguille, aspirez de l'air dans la seringue, remettez l'aiguille et expulsez tout le liquide restant juste au-dessus de la dilution.

IMPORTANT : Une fois l'échantillon ajouté au diluant, il doit être traité sur l'analyseur dans la prochaine heure.



- c. Tirez sur l'emballage en aluminium du bouchon de réactif pour le retirer et poussez fermement le bouchon (extrémité plate vers le bas, extrémité à languette vers le haut) sur le tube d'échantillon jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le haut du tube.

IMPORTANT : Le bouchon du réactif doit être poussé sur le tube dans les 10 minutes suivant le retrait de l'emballage en aluminium du bouchon.




- d. Inversez le tube 5 fois pour mélanger (ne pas agiter).



- e. Dévissez la languette du bouchon et distribuez l'intégralité du tube de solution dans l'orifice de la cartouche (tapotez doucement le côté du tube pour déloger les gouttelettes restantes, si présentes).

4. Assurez-vous que la chambre droite de la cartouche est remplie au moins au tiers et que le tube d'échantillon a été complètement vidé dans l'orifice de la cartouche.

IMPORTANT : Si le tube est complètement vide et que la chambre droite n'est toujours pas remplie au moins au tiers, inclinez la cartouche vers le bas pour étaler l'échantillon.

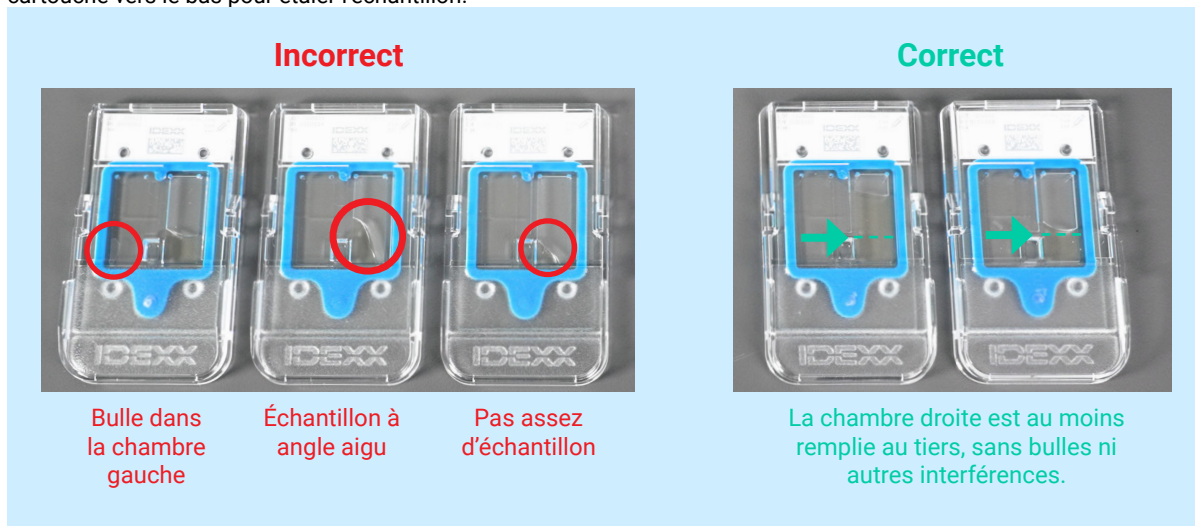

5. Insérez la cartouche dans la fente à l'avant de l'analyseur jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'y enclenche.
6. Appuyez sur le bouton **Démarrer** à l'avant de l'analyseur. La cartouche est ensuite introduite dans l'analyseur. L'analyse prend 15 minutes ou moins. Lorsque l'analyse est terminée, la cartouche est partiellement éjectée hors de l'analyseur.

EN OPTION : Commande d'un examen par un pathologiste de votre résultat par AAF d'IDEXX inVue Dx

Les analyses par AAF d'IDEXX inVue Dx qui produisent des résultats diagnostiques complets sont admissibles à être envoyés aux laboratoires de référence IDEXX pour un examen pathologique à prix réduit. Les pathologistes d'IDEXX sont spécialement formés et peuvent fournir des renseignements et une interprétation plus approfondis du cas en se basant sur les images IDEXX inVue Dx et sur les détails propres au cas.

Une évaluation pathologique ne peut pas être commandée tant que l'exécution initiale de la cytologie par AAF de l'analyseur cellulaire IDEXX inVue Dx n'est pas terminée. Cela garantit que les images de résultat générées par l'exécution de l'AAF sont diagnostiquement valables avant d'être transmises à un pathologiste pour examen. Dès que les résultats de l'analyseur IDEXX inVue Dx sont disponibles, vous pouvez demander l'évaluation par un pathologiste IDEXX inVue Dx (INVUFSQ) en utilisant :

- + Un SGIC intégré à VetConnect™ PLUS (pour plus de renseignements sur la commande de diagnostics dans votre SGIC, veuillez consulter la documentation de votre SGIC ou communiquez avec le service d'assistance).

OU

- + VetConnect PLUS:
 1. Sur l'écran d'accueil de VetConnect PLUS, sélectionnez l'analyse de patient IDEXX inVue Dx applicable dans la liste complète.
 2. Dans l'écran des résultats, appuyez sur **Commander un examen du pathologiste** (Order Pathologist Review).

Remarque : Cette option est disponible uniquement lorsque l'échantillon par AAF était de qualité diagnostique et que l'analyseur IDEXX inVue Dx a fourni un résultat complet.
 3. Sélectionnez le code de test applicable pour l'évaluation par le pathologiste en fonction du délai d'exécution souhaité :
 - + Pour des résultats sous 1 à 2 jours (du lundi au vendredi) à compter de la réception de toutes les images* par IDEXX, sélectionnez **Évaluation par un pathologiste IDEXX inVue Dx (INVUFSQ)**.
 - + Pour des résultats sous 2 heures (en tout temps) à compter de la réception de toutes les images* par IDEXX, sélectionnez **Évaluation par un pathologiste IDEXX inVue Dx (INVUFEX)**.
 4. Si demandé, saisissez les détails de l'échantillon et appuyez sur **Terminé** (Done).
 5. Sélectionnez le vétérinaire traitant dans la liste des vétérinaires. Si le vétérinaire traitant n'est pas répertorié, vous pouvez l'ajouter en saisissant son nom dans la case.
 6. Sélectionnez **Commander** (Order). Les renseignements du patient sont déplacés vers la liste En cours de traitement (In process) dans VetConnect PLUS, et les images d'analyses d'AAF d'IDEXX inVue Dx sont automatiquement envoyées au pathologiste (l'envoi des images est considéré comme réussi dès que le statut En cours de traitement [In Process] passe de « En cours de téléchargement » [Uploading] à « En cours de traitement » [Processing]).

* Le délai d'exécution de l'examen commence dès qu'IDEXX a reçu l'ensemble des images IDEXX inVue Dx. Le temps nécessaire pour télécharger les images IDEXX inVue Dx vers les laboratoires de référence IDEXX peut varier en fonction de votre bande passante Internet.