

Lecture des bandelettes IDEXX UA*

Utilisez de l'urine fraîche non centrifugée. Mélangez soigneusement l'échantillon d'urine. L'échantillon doit être à température ambiante au moment du test et ne doit pas avoir été prélevé depuis plus d'une heure.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *manuel d'utilisation de l'analyseur IDEXX VetLab* UA**.




- 1 Utilisez une pipette pour verser l'échantillon d'urine sur la bandelette UA, en vous assurant que toutes les zones de test sont bien imprégnées. Ne pas plier la bandelette.

IMPORTANT : seules les bandelettes IDEXX UA peuvent être utilisées avec l'analyseur IDEXX VetLab UA. N'utilisez aucune autre marque de bandelettes.



- 2 Tamponnez rapidement (environ une seconde) la tranche puis le dos de la bandelette de test sur un papier absorbant (par ex., une serviette en papier).

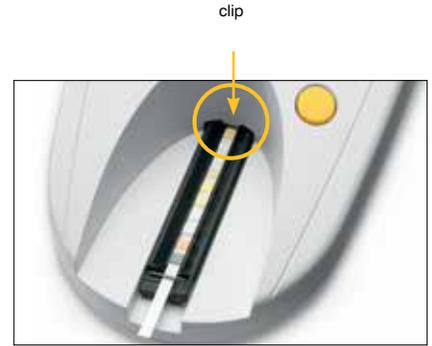

- 3 Placez la bandelette de test, avec les zones de test orientées vers le haut, sur la glissière pour bandelettes de test, de telle sorte que l'extrémité distale soit couverte par le clip de la fente d'insertion. La barre de maintien doit être ouverte. Environ 2 mm de bandelette doivent être glissés sous le clip.



- 4 Appuyez sur le bouton **Start**. Un bip est émis. La glissière avance lentement et la barre de maintien se referme.

La glissière pour bandelettes tire automatiquement la bandelette de test vers l'intérieur de l'analyseur pour en permettre la lecture, puis reprend sa position initiale. Ne retirez pas la bandelette tant que l'analyseur n'est pas repassé en mode prêt à mesurer. Cela prend environ 80 secondes, depuis le moment où vous appuyez sur le bouton Start, jusqu'à la fin de toutes les mesures.



- 5 Une fois que les résultats sont imprimés, enlevez et jetez la bandelette de test. À l'aide d'une lingette ne laissant pas de résidus, retirez toute trace d'urine résiduelle sur la glissière.

REMARQUE : si l'analyseur UA est relié à la IDEXX VetLab Station, les résultats du test sont automatiquement transmis à celle-ci.

Soutien technique IDEXX

États-Unis/Canada 1-800-248-2483

Europe 00800 1234 3399

Australie 1300 44 33 99

Nouvelle-Zélande 0800-102-084

Asie 0800-291-018